

## TENDER FLASK IN-PRESS

REF.TXF2 MUFFOLA SMALL PER COMPOSITO  
Base in alluminio  
Colonnette in acciaio inox small 3pz  
Coperchio in policarbonato trasparente small  
Piastre con base metallica e magnete 2pz  
Contromagneti bruniti 2pz  
Chiavistello di chiusura a clic in acciaio inox  
Piatello di compressione  
Estrattori per gesso 2pz  
Tappini chiusura fori parte superiore 6pz  
Sfere di riempimento 100pz



## STEP BY STEP



Tender Tray 1



Stampo in gomma e linguetta spaziatrice



Colatura del gesso sul Tray



Colatura del gesso nell'impronta



Allineamento impronta



Rimozione box dal modello



Estrusione modello



Sezionamento e rifinitura



Incollaggio magneti



Modello sezionato



Magnete per messa in articolatore



Tender Tray utilizzabile in muffola

REF.TXF1 MUFFOLA COMPLETA  
Base in alluminio  
Colonnette in acciaio inox standard 3pz  
Coperchio in alluminio lucidato  
Coperchio nero in fibra di vetro  
Coperchio in policarbonato trasparente standard  
Colonnette in acciaio inox small 3pz  
Coperchio in policarbonato trasparente small  
Piastre con base metallica e magnete 2pz  
Contromagneti bruniti 4pz  
Chiavistello di chiusura a clic in acciaio inox  
Piatello di compressione  
Estrattori per gesso 2pz  
Tappini chiusura fori parte superiore 6pz  
Sfere di riempimento 100pz

VERTICOLATORI  
Base in alluminio con 3 colonnette in acciaio  
Piastre con base metallica e magnete  
Spaziatori varie misure e fermi di chiusura  
Coperchio verticolatore  
REF.TX5C VERTICOLATORE x COMPOSITO  
Verticolatore con coperchio trasparente  
REF.TX5B VERTICOLATORE RESINA/CERAMICA  
Verticolatore con coperchio nero in fibra di vetro



REF.TXF1V MUFFOLA COMPLETA  
+ COPERCHI VERTICOLATORE E ACCESSORI

## TECNICA PER DOPPIA IMPRONTA



Distanziatore per doppie impronte



Montaggio dei Tray in articolatore con magnete



Posizionamento doppia impronta



Montaggio dei modelli in articolatore

# TENDER TRAY *Magnetic*

# TENDER TRAY *Magnetic*



# TENDER TRAY Magnetic

## SISTEMA DI PRECISIONE PER MONCONI SFILABILI

Questo sistema nasce da un'idea odontotecnica e creata per l'odontotecnico. Grazie alla collaborazione con aziende meccaniche ed ingegneri specializzati sono state realizzate e brevettate due sistematiche compatibili tra loro per realizzare qualsiasi tipo di protesi dentale.

Tender Tray Magnetic e Tender Flask In Press sono stati progettati con disegni geometrici ideali per poter adoperare qualsiasi materiale di consumo odontotecnico. La ricerca e la conoscenza delle materie prime utilizzate per la realizzazione di questi prodotti sono un punto di forza della nostra azienda, che mira ad offrire una qualità unica nel suo genere.

Tender Tray Magnetic è un sistema per modelli di precisione sezionabili con riposizionamento geometrico e magnetico. La piastra di materiale antiriflesso si presta perfettamente per la scansione Cad-Cam.

Tender Flask In Press è una muffola innovativa con diversi coperchi in grado di poter ospitare al suo interno il Tender Tray Magnetic, ed è utilizzabile sia con tecnica ad iniezione che a pressione.



Tender Tray 1 e 3 consentono l'utilizzo di un magnetino da incollare sotto il moncone per migliorarne la stabilità rendendola ineguagliabile. Inoltre il rinforzo metallico consente anche l'abbinamento di un altro magnete per la messa in articolatore.



**Tender Tray 1**  
con ritenzioni a perno e rinforzo metallico per monconi "magnetici"



**Tender Tray 2**  
con ritenzioni a perno totalmente in plastica



**Tender Tray 3**  
con ritenzioni zigriate e rinforzo metallico per monconi "magnetici" su impianti



**Tender Tray 4**  
piatto senza ritenzioni per split cast

Tender Tray 2, più economico, è dotato comunque di un magnete che facilita la messa in articolatore. Può essere utilizzato in alternativa alle basette colorate per l'invio dei lavori al dentista quando effettuato in articolatore. Tender Tray 4, ideale per split cast, è adatto all'utilizzo in muffola come Tender Tray 1 e 3

# TENDER TRAY Magnetic

## RAPIDO ECONOMICO E MAGNETICAMENTE ACCURATO

KIT INTRODUTTIVO TENDER TRAY	
Baseetta Tender Tray 1	2 pz
Baseetta Tender Tray 2	1 pz
Linguetta in gomma per colata modello	1 pz
Box in gomma per colata modello	1 pz
Strumento estraимodelli / allineatore	1 pz
Magneti per messa in articolatore	2 pz
Magnetini per monconi	10 pz
Baseetta portalavori	2 pz


KIT RICAMBI TENDER TRAY 1 Magnetic	
Basette con ritenzioni a perno e rinforzo metallico	10 pz

KIT RICAMBI TENDER TRAY 2	
Basette con ritenzioni a perno in plastica	10 pz

KIT RICAMBI TENDER TRAY 3 Magnetic per IMPIANTI	
Basette con ritenzioni zigriate e rinforzo metallico	10 pz

KIT RICAMBI TENDER TRAY 4 Magnetic per SPLIT CAST	
Basette lisce con rinforzo metallico	5 pz

Ricambi	
TX41 Linguetta in gomma per colata modello	10 pz
TX42 Box in gomma per colata modello	2 pz
TX43 Strumento estraимodelli / allineatore	2 pz
TX44 Magneti per messa in articolatore	10 pz
TX45 Magnetini per monconi	100 pz
TX15 Baseetta portalavori per Tender Tray 1 e 2	24 pz
TX35 Baseetta portalavori per Tender Tray 3	24 pz

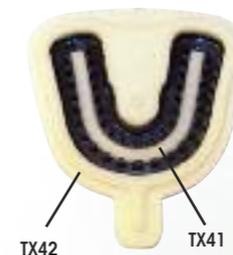

TX42 TX41

TX35

# TENDER FLASK IN-PRESS

Muffola con coperchi di diversi materiali:

- Trasparente per composito
- In fibra di vetro per acrilico con controstampo in silicone
- In alluminio per acrilico con controstampo in gesso



Toronto bridge  
Protesi totale  
Dime chirurgiche  
Provvisori  
Bite  
Duplicazione modelli  
Corone ponti in composito