

MISTRAL KLEAR

ATTACCHI AUTOLEGANTI INTERATTIVI

Frizione ridotta e maggiore controllo sul movimento dei denti

MISTRAL KLEAR è un sistema di brackets autoleganti estetici.

L'attacco autolegante interattivo MISTRAL KLEAR è stato progettato per combinare una minore frizione durante le fasi di livellamento/allineamento, e un controllo nelle fasi finali ad una eccellente estetica per soddisfare le richieste dei pazienti.

Bordo arrotondato

che unito al profilo basso aumenta il comfort del paziente durante il trattamento ortodontico

Gancio a palla

parallelo alla base per un maggior comfort del paziente

Sistema di apertura

Possibilità di aprire la clip sia dal lato gengivale che dal foro occlusale

Posizionamento accurato

grazie alla linguetta in elastomero colorata, priva di lattice, parallela al bordo incisale del dente

Slot liscio

Frizione bassa grazie al trattamento di superficie

Trattamento di superficie

speciale su corpo e ganci per rinforzarli


Corpo traslucido

che si abbina al colore del dente

Spessore della clip

ottimizzato per evitare deformazioni

Basetta

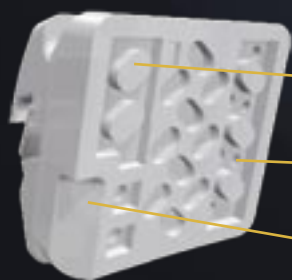

Superficie estesa per aumentare la ritenzione

La base segue la curva del dente

Scanalatura laterale per facilitare il debonding dell'attacco

Strumento

Apertura primaria della clip



Apertura secondaria della clip






MISTRAL KLEAR

TECNICA ROTH .022

ATTACCO ESTETICO AUTOLEGANTE INTERATTIVO

SUPERIORE		Torque	Ang	Larghezza	R	.022	L
Centrale		+12	+5	3,4	BMC2R11		BMC2R21
Laterale		+8	+9	3,1	BMC2R12		BMC2R22
Canino	con gancio	-2	+8	3,3	BMC2R13H		BMC2R23H
1° Premolare	con gancio	-7	0	3,4	BMC2R14H		BMC2R24H
2° Premolare	con gancio	-7	0	3,4	BMC2R15H		BMC2R25H

INFERIORE		Torque	Ang	Larghezza	R	.022	L
Anteriori		0	0	3,0		BMC2R31	
Canino	con gancio	-11	+7	3,3	BMC2R43H		BMC2R33H
1° Premolare	con gancio	-17	0	3,3	BMC2R44H		BMC2R34H
2° Premolare	con gancio	-22	0	3,3	BMC2R45H		BMC2R35H


KIT	Descrizione	.022
	1 caso (5/5) 20 pz + gancio su 3/4/5	BMC2RKG
	1 caso (5/5) 10 pz superiore + gancio su 3/4/5	BMC2RK10G
	Ricambi 1 pz	

TECNICA BENNETT .022

ATTACCO ESTETICO AUTOLEGANTE INTERATTIVO

SUPERIORE		Torque	Ang	Larghezza	R	.022	L
Centrale		+17	+4	3,4	BMC2B11		BMC2B21
Laterale		+10	+8	3,2	BMC2B12		BMC2B22
Canino	con gancio	0	+8	3,4	BMC2B13H		BMC2B23H
1° Premolare	con gancio	-7	0	3,4	BMC2B14H		BMC2B24H
2° Premolare	con gancio	-7	0	3,4	BMC2B15H		BMC2B25H

INFERIORE		Torque	Ang	Larghezza	R	.022	L
Anteriori		0	0	3,0		BMC2B31	
Canino	con gancio	0	+3	3,4	BMC2B43H		BMC2B33H
1° Premolare	con gancio	-12	0	3,4	BMC2B44H		BMC2B34H
2° Premolare	con gancio	-17	0	3,4	BMC2B45H		BMC2B35H

KIT	Descrizione	.022
	1 caso (5/5) 20 pz + gancio su 3/4/5	BMC2BKG
	1 caso (5/5) 10 pz superiore + gancio su 3/4/5	BMC2BK10G
	Ricambi 1 pz	



STRUMENTO MISTRAL KLEAR

Per l'apertura della clip

BMCINST