

# SPINNAKER SELF

## TUBI BUCCALI AUTOLEGANTI

### Frizione ridotta e controllo ottimale sul movimento dei denti

SPINNAKER SELF è un tubo autolegante altamente innovativo e dalle altissime prestazioni. È realizzato per garantire la massima semplicità e funzionalità. Facilita l'inserimento di archi nei tubi per il molari. Ideale da abbinare a qualsiasi attacco autolegante, può essere utilizzato anche in combinazione con attacchi gemellari al posto di un tubo convertibile.

#### Efficienza

Disegnato per velocizzare i cambi dell'arco e ridurre la frizione per un movimento dei denti più efficiente

#### Clip termica in NiTi

studiata per una facile apertura e chiusura e la massima affidabilità  
Ampia ed elastica per il maggior controllo rotazionale

#### Clip passiva

minore frizione durante tutte le fasi del trattamento

#### Foro di apertura

per l'inserimento dello strumento e l'apertura della clip

#### Bordo arrotondato

che insieme al profilo basso aumenta il comfort del paziente durante il trattamento ortodontico

#### Gancio integrato

curvo nei superiori e dritto negli inferiori per ottimizzare funzionalità e comfort per il paziente


#### Basetta



- Sabbata per massimizzare l'adesione sul dente
- Sagoma ideale per un adattamento accurato
- Ritenzione a forma di fungo per creare sottosquadri e migliorare la ritenzione

## Apertura

Posizionare la punta dello strumento nella fessura della clip e Inclinare l'altro terminale in posizione gengivale

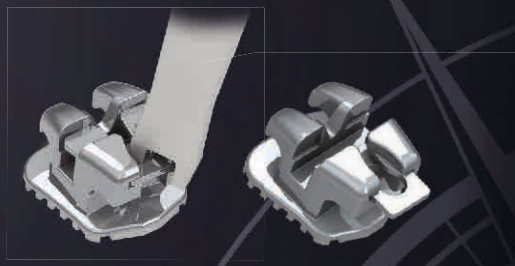

## Chiusura

È sufficiente una leggera pressione con le dita o utilizzando lo stesso strumento



## Kit Spinnaker

- Il Kit viene venduto con 10 tubi per quadrante superiori e inferiori
- È possibile aggiungere anche i Molari Premium
- Ogni scomparto può contenere sino a 40 tubi



# SPINNAKER SELF

### AUTOLEGANTI

### TUBI DIRETTI

Design	Tecnica	Tipologia	Torque	Rot.	Posizione	Dx	Sx
	SW .022	Singolo	-10	8	I Mol. sup	TMR216	TMR226
	SW .022	Singolo	-25	5	I Mol. inf	TMR246	TMR236
	Damon .022	Singolo	-18	12	I Mol. sup	TMD216	TMD226
	Damon .022	Singolo	-28	2	I Mol. inf	TMD246	TMD236

Confezione da 5 pz

KIT	Descrizione	SW .022	Damon .022
	Kit 6 / 6 40 pz	TMR2K6	TMD2K6

### STRUMENTO MISTRAL / TUBI AUTOLEGANTI

Strumento per l'apertura della clip

BMINST1

